

Indicações de utilização para fixações

Por favor, leia estas instruções antes de usar as fixações. Elas contêm importantes indicações sobre as possíveis configurações e sobre a possibilidade de combinação de fixações, de modo a aproveitar ao máximo a câmara de esterilização. Pode ainda encontrar informações sobre a limpeza e conservação e sobre outros acessórios.

1 Utilização correcta

As fixações destinam-se a suportar bandejas, boxes MELAstore ou recipientes de esterilização. Os autoclaves da classe Premium-Plus Evolution são, por norma, fornecidos com a fixação E "Plus", e os autoclaves da classe Profissional e da classe S com a fixação A.

1.1 Validade

As fixações são compatíveis com as seguintes classes de aparelho:

Fixação A, A "Plus", B, D

Classe de aparelho	Tipo de aparelho
Classe profissional/Clássico	Vacuklav 23 B+, 24 B+, 24 B/L+, 30 B+, 31 B+
	Vacuklav 23-B, 24-B, 24-B/L, 30-B, 31-B
Classe S/Euroklav	Euroklav 23 VS+, 29 VS+, 23 S+
	Euroklav 23V-S, 29V-S, 23-S, 29-S
Classe Premium-Plus Evolution Classe Premium-Plus	Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+
Classe Premium	Vacuklav 40-B, 41-B, 43-B, 44-B

Fixação C, C "Plus", D "Plus", E "Plus", F "Plus"

Classe de aparelho	Tipo de aparelho
Classe Premium-Plus Evolution Classe Premium-Plus	Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+
Classe Premium	Vacuklav 40-B, 41-B, 43-B, 44-B

2 Resumo das variantes de carga das respetivas fixações

No seguinte resumo pode consultar qual a fixação que pode ser usada para que classe de aparelho e quais são as possibilidades de variantes de carga. É importante que esteja atento às quantidades máximas de carga, de acordo com as instruções de operação do respetivo autoclave.

		Classe profissional/ Classe S ³⁾ Classe Premium-Plus ⁴⁾	N.º do		Profundidade da caldeira		Bandejas								Recipiente de esterilização				Tambores de tampão				Cartuchos Norm-Tray		Boxes MELAstore ⁵⁾	
					curta	comprida	15 K	15 M	15 G	17 K	17 M	17 G	23 M	23 G	28 M	28 G	17 R	23 R		100	200					
●	-	Fixação A	40233	curta	5	4	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	-					
			40244	comprida	-	5	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	-					
●	-	Fixação A "Plus"	82620	curta	5	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	-					
			82630	comprida	-	5	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	-					
●	●	Fixação B	40234	curta	4	-	4	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	4	-	-					
			40224	comprida	-	4	6	3	2	6	-	-	-	-	2	1	3	2	4	-	-					
-	●	Fixação C	40232	curta	6	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	-					
			40242	comprida	-	6	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	-					
-	●	Fixação C "Plus"	81370	curta	6	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	-					
			81380	comprida	-	6	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	-					
●	●	Fixação D	46840		4	-	4	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2					
-	●	Fixação D "Plus"	82640	curta	2+2 ¹⁾	-	4+2 ¹⁾	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2+2 ¹⁾	2+2 ¹⁾	2+2 ¹⁾					
			82650	comprida ²⁾	-	2+2 ²⁾	6+2 ²⁾	2	1	4	2	1	2	-	2	-	-	-	2+2 ²⁾	2+2 ²⁾	2+2 ²⁾					
-	●	Fixação E "Plus"	82400	curta	6+2 ¹⁾	-	6	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-					
			82700	comprida	-	6+2 ²⁾	9	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	-	-	-					
-	●	Fixação F "Plus"	82660	curta	3+2 ¹⁾	-	6+2 ¹⁾	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	3+2 ¹⁾	3+2 ¹⁾	-					
			82670	comprida	-	3+2 ¹⁾	9+2 ²⁾	3	2	4	2	1	2	1	2	1	3	-	3+2 ¹⁾	3+2 ¹⁾	-					

1) Esta fixação pode ainda suportar duas bandejas estreitas adicionais (profundidade 27 cm)

2) Esta fixação pode ainda suportar duas bandejas estreitas adicionais (profundidade 40 cm)

3) O mesmo é válido para os clássicos e a geração de Euroklav anterior

4) O mesmo é válido para a classe Premium-Plus Evolution e a classe Premium

5) As Boxes MELAstore só podem ser usadas em equipamentos com processo de vácuo fraccionado (p. ex. classe Premium-Plus, classe profissional).

3 Indicações gerais de segurança



Para usar o acessório deve observar as seguintes indicações de segurança. Use o acessório somente para a finalidade prevista nestas instruções.

- Quando retirar o autoclave, segure na fixação na horizontal. Caso contrário, a carga pode escorregar para fora.
- Certifique-se que a fixação não escorrega sem querer, quando a fixação estiver a ser diretamente carregada para o autoclave ou quando retirar a carga separadamente do autoclave.
- Nunca toque no material esterilizado, na caldeira, em outras partes na caldeira ou na parte interior da porta com as mãos desprotegidas. As peças podem estar quentes.
- Para retirar o material esterilizado deve usar meios auxiliares adequados, tais como um elevador de bandejas ou luvas de proteção, para evitar queimaduras.

4 Utilização



Observe sempre também as indicações de uso das fixações que constam no manual de utilizador do seu autoclave.

4.1 Fixações padrão


Fixação A

N.º do artigo 40233 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm)

N.º do artigo 40244 (para uma profundidade da caldeira de 45 cm)

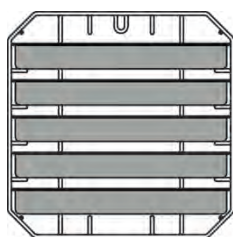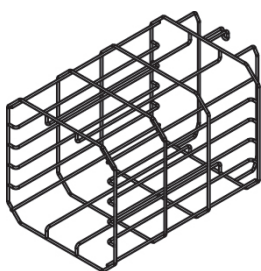

para 5 bandejas


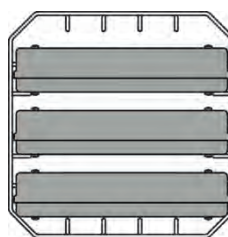


para 3 cartuchos Norm-Tray ou
3 Boxes MELAstore 100 (fixação
rodada em 90°)

Fixação B

N.º do artigo 40234 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm)

N.º do artigo 40224 (para uma profundidade da caldeira de 45 cm)

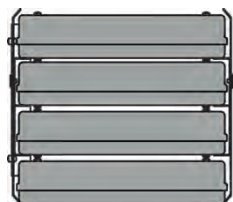
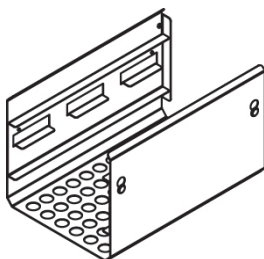


para 4 cartuchos Norm-Tray
(ou 4 bandejas)


Fixação C

N.º do artigo 40232 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm)

N.º do artigo 40242 (para uma profundidade da caldeira de 45 cm)

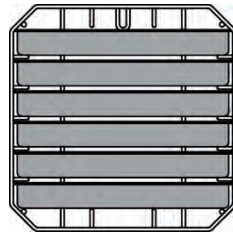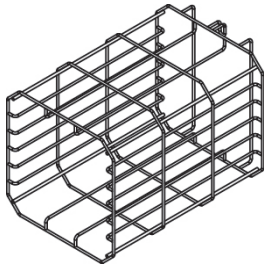



para 6 bandejas

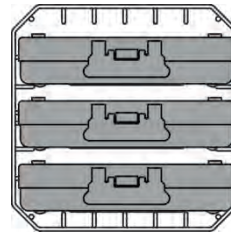


Para 3 Boxes MELAstore 100
(fixação rodada em 90°)

Fixação D

N.º do artigo 46840 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm e 45 cm)

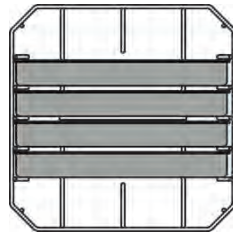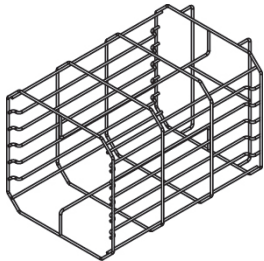

para 4 bandejas

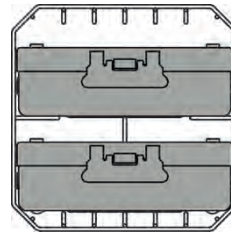

para 2 cartuchos altos ou 2 Boxes
MELAstore 200 (fixação rodada
em 90°)



4.2 Fixações "Plus"

As fixações "Plus" estão equipadas com cliques deslizantes nos cantos. Estes protegem a câmara contra arranhões e simplificam a inserção ou remoção ao carregar e descarregar. As fixações vêm com mais cliques deslizantes como artigos de reserva. Retire o saco com os cliques deslizantes antes da primeira utilização. Troque os cliques deslizantes atempadamente se indiciarem um desgaste visível, consulte a Secção [Substituição dos cliques deslizantes](#) [▶ page 7].


Fixação A "Plus"

N.º do artigo 82620 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm)

N.º do artigo 82630 (para uma profundidade da caldeira de 45 cm)

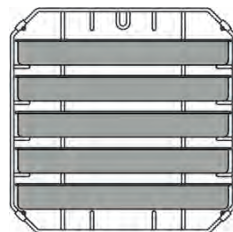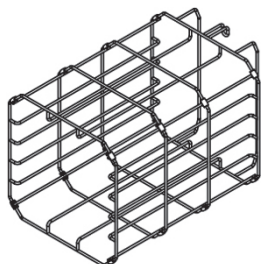

para 5 bandejas


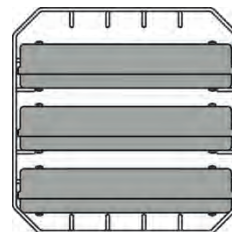


para 3 cartuchos Norm-Tray ou 3 Boxes
MELAstore 100 (fixação rodada em
90°)


Fixação C “Plus”

N.º do artigo 81370 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm)

N.º do artigo 81380 (para uma profundidade da caldeira de 45 cm)

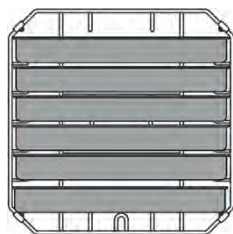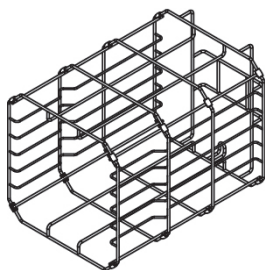

para 6 bandejas


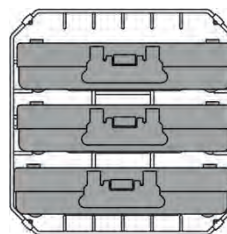


para 3 cartuchos Norm-Tray ou 3 Boxes MELAstore 100 (fixação rodada em 90°)

Fixação D “Plus”

N.º do artigo 82640 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm)

N.º do artigo 82650 (para uma profundidade da caldeira de 45 cm)

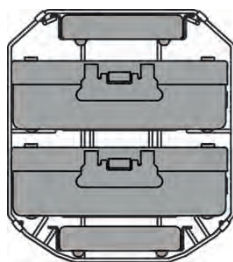
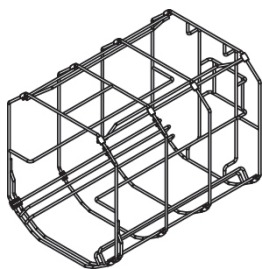


para 2 Boxes MELAstore 200 ou 2 Boxes MELAstore 100 e 2 bandejas estreitas

Fixação E “Plus”

N.º do artigo 82400 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm)

N.º do artigo 82700 (para uma profundidade da caldeira de 45 cm)

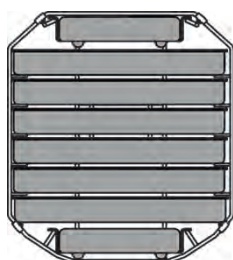
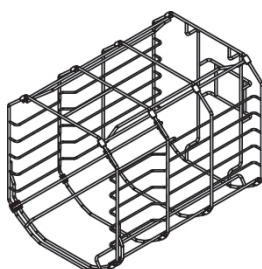


para 6 bandejas e 2 bandejas estreitas

Fixação F “Plus”

N.º do artigo 82660 (para uma profundidade da caldeira de 35 cm)

N.º do artigo 82670 (para uma profundidade da caldeira de 45 cm)

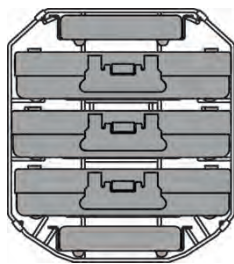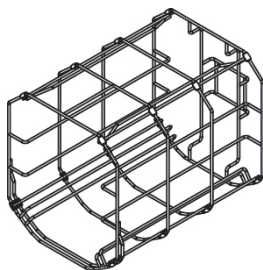

para 3 Boxes MELAstore 100 e 2 bandejas estreitas

5 Limpeza e conservação

Verifique a fixação para a carga **uma vez por semana** para detetar sujidade, depósitos ou danos.

Se detetar sujidade, puxe as bandejas ou cartuchos existentes e a respetiva fixação para a frente para retirar para fora da caldeira. Limpe as peças sujas.


Durante a limpeza da fixação para a carga, das bandejas e idêntico deve estar atento ao seguinte:

- ▶ Certifique-se que a câmara de esterilização não está quente.
- ▶ Use um pano macio e que não largue fios.
- ▶ Mergulhe primeiro o pano em álcool de limpeza ou álcool etílico e tente retirar a sujidade com esse.
- ▶ Use produtos de limpeza não acéticos e livres de cloro.
- ▶ Em caso de sujidade profunda, é recomendada a utilização de meios de limpeza de aço inoxidável suaves e não abrasivos, cuja valor de pH se situe entre 5 e 8.
- ▶ Remova quaisquer resíduos de produto de limpeza da fixação após a limpeza.
- ▶ Não use objetos duros, tais como esfregões metálicos ou escovas de aço.

5.1 Substituição dos cliques deslizantes

Se alguns cliques deslizantes apresentarem desgaste, pode substituí-los do seguinte modo:

1. Retire o clipe deslizante antigo, puxando-o cuidadosamente para cima com uma pequena chave de fendas. Certifique-se que os fios não ficam danificados ou arranhados.

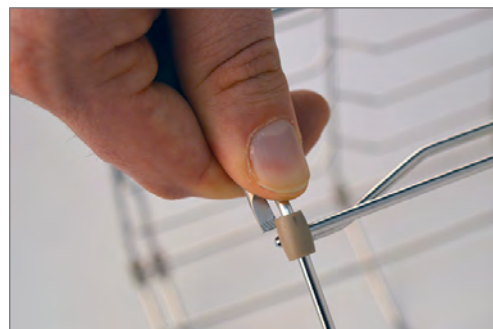

2. Pressione o novo clipe deslizante na mesma posição na cruz de fio metálico sobre a barra de metal até sentir que engatou.



6 Acessórios e peças de substituição

6.1 Acessórios

Pode obter junto do comércio especializado todos os artigos apresentados, bem como um resumo de outros acessórios.

Categoria	Artigo	N.º de encomenda (depende da profundidade da caldeira)	
		35 cm	45 cm
Bandejas	Bandeja	00280	00230
	Bandeja, estreita	01320	01310
	Elevador de bandejas	28885	
Suporte de películas	Suporte de películas	22410	22420
Recipiente de esterilização com filtro de papel descartável segundo DIN EN 868-8	15K (18 x 12 x 4,5 cm)	01151	
	15M (35 x 12 x 4,5 cm)	01152	
	15G (35 x 12 x 8 cm)	01153	
	17K (20 x 14 x 5 cm)	01171	
	17M, para profundidade da caldeira de 45 cm (41 x 14 x 5 cm)	---	01172
	17G, para profundidade da caldeira de 45 cm (41 x 14 x 9 cm)	---	01173
	23M, para profundidade da caldeira de 45 cm (42 x 16 x 6 cm)	---	01231
	23G, para profundidade da caldeira de 45 cm (42 x 16 x 12 cm)	---	01232
	28M (32 x 16 x 6 cm)	01284	
	28G (32 x 16 x 12 cm)	01285	
Cartuchos Norm-Tray, furados	- com tela filtrante (29 x 19 x 4 cm)	00289	
	- sem tela filtrante (29 x 19 x 4 cm)	00286	
Sistema MELAstore	MELAstore-Tray 50 (18 x 11,8 x 3 cm)	01180	
	MELAstore-Tray 100 (27,5 x 17,6 x 3 cm)	01181	
	MELAstore-Tray 200 (27,5 x 17,6 x 4,3 cm)	01182	
	MELAstore-Box 100 (31,2 x 19 x 4,6 cm)	01191	
	MELAstore-Box 200 (31,2 x 19 x 6,5 cm)	01192	

6.2 Peças de substituição

Categoria	Artigo	N.º de encomenda
Fixações "Plus"	Clipes deslizantes para fixações "Plus", 10 unidades	81235