

La Serie Euroklav de MELAG

Los autoclaves económicos de "Clase S"



500,000 unidades MELAG en todo el mundo

Calidad excepcional en la cual puede confiar.

Las consultas y clínicas de todo el mundo se benefician de la calidad única de MELAG, fabricada en Alemania. Descubra las ventajas de nuestros autoclaves Clase Profesional, fiables y de alto rendimiento para una esterilización segura de instrumentos. Encuentre más referencias en su país en:

Encuentre más referencias en su país en: www.melag.com/es/referencias



„Los fiables autoclaves de MELAG ahorran un tiempo considerable y garantiza los más altos niveles de seguridad para los pacientes y el equipo de la consulta por igual.“

 Clínica Frank Bachmann, Alemania



„Nos enfocamos en la salud integral y el bienestar de nuestros pacientes. La solución del sistema MELAG es perfectamente compatible con este enfoque.“

 28CliniC, Japón



„Con nuestro esterilizador a vapor MELAG ofrecemos los más altos estándares de seguridad y protección para nuestros leales amigos, ¡Nuestras mascotas!“

 Animalogic Clínica Veterinaria, España




„Autoclaves MELAG - la mejor opción para el bienestar y la seguridad de nuestros pacientes.“

 Sakala Hambaravi, Estonia



„MELAG garantiza una calidad de primera clase y los más altos estándares tecnológicos.“

 Primer Centro Dental Privado, Ucrania

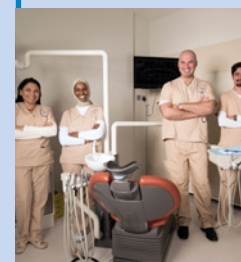

„En MELAG, hemos en contrado un excelente socio que proporciona los mejores estándares de higiene posibles y flujos de trabajo óptimos.“

 Sparkle Dental Boutique, Abu Dabi



„Elegimos MELAG por su confiabilidad, facilidad de servicio y bajos costos de mantenimiento.“

 Ortodoncia Platino, Ghana



„El sistema MELAG garantiza un flujo de trabajo de descontaminación rápido y seguro en nuestra clínica.“

 Asociados de Prostodoncia, Australia

La Serie Euroklav®

Único en precio y rendimiento.

Con la serie Euroklav® rápida y confiable, ofrecemos una alternativa aún más barata para consultorios y clínicas los cuales no requieren un autoclave de clase B debido a los instrumentos utilizados. Los autoclaves MELAG de clase S esterilizan con un efectivo pre-vacío junto con un proceso de flujo fraccionado incluso los instrumentos empaquetados con cuerpos huecos simples.

Puede confiar en nuestras soluciones innovadoras para el reprocesamiento de instrumentos. La siguiente página proporciona un resumen de los principales beneficios:



Experiencia:
Especialización desde 1951



Confianza:
Más de 500,000 unidades vendidas en todo el mundo



Calidad:
Made in Germany



Innovación:
450 empleados /as especializados en Berlín



Solución del sistema:
Descontaminación de instrumentos de un único proveedor



Aspectos destacados del producto:

Rendimiento

Los tiempos de ciclo cortos y el secado rápido al vacío efectivo permiten flujos de trabajo eficientes.



Seguridad

La interfaz de documentación integrada proporciona la máxima fiabilidad del proceso.



Flexibilidad

Personalice la profundidad de la cámara y el suministro de agua según sus necesidades individuales.



La facilidad de uso

El concepto de 4 teclas MELAG y nuestras herramientas digitales crean un concepto operativo intuitivo.



Obtenga más información sobre los aspectos más destacados del producto en nuestro video:
www.melag.com/es/multimedia



Adaptado a su flujo de trabajo:

Euroklav® 23 VS+

autoclave autónomo con cámara de 45 cm de profundidad



Euroklav® 29 VS+

autoclave autónomo con cámara de 35 cm de profundidad



Euroklav® 23 S+

autoclave autónomo con cámara de 45 cm de profundidad y procesos de flujo fraccionado.



Ahorre aún más tiempo y dinero:

con un sistema opcional de tratamiento de agua MELAdem®, se beneficia del ahorro de mano de obra a través del suministro y eliminación automatizada de agua.

Los productos destacados de la Serie Euroklav®

Estas ventajas son únicas.

Gane más tiempo tratando a sus pacientes. Al desarrollar la serie Euroklav, prestamos atención a flujos de trabajo de la clínica para que fueran eficientes y seguros desde el primer minuto. Obtenga más información sobre las ventajas de tiempos de operación cortos, operación intuitiva y los diversos medios de documentación de nuestros autoclaves independientes de la Clase S:



Rendimiento

Procesos de esterilización cortos para su consulta: **El programa rápido (incluido el pre-vacío)** esteriliza los instrumentos sin **embolsar en solo 15 minutos***. Cantidades más grandes de instrumentos embolsados pueden esterilizarse en solo 25 minutos*.

Para un uso óptimo de la cámara de esterilización, puede usar una variedad distinta de soportes de inserción. Los accesorios coordinados garantizan una **carga óptima** del autoclave con hasta **4 kg**.

* Datos sin secado



Seguridad

Los esterilizadores de vapor MELAG controlan todos los **parámetros relevantes del proceso utilizando un control de microprocesador de alta precisión**. Los registros del programa proporcionan seguridad jurídica y se guardan a través de una interfaz en serie.

Nuestros medios de documentación alineados ofrecen la máxima flexibilidad: personalice el proceso de documentación con la impresora de tarjetas CF MELAflash, MELAnet Box, MELAprint® 44 o el software de aprobación MELAtrace® según sus necesidades.



Flexibilidad

Un sistema dos Autoclaves; Para cumplir con los diferentes requisitos de los instrumentos a esterilizar, le ofrecemos dos tamaños de cámara: Euroklav® 29 VS+ con 17 litros y Euroklav® 23 VS+ / S+ con 23 litros.

Los autoclaves autónomos con los recipientes de agua integrados y la refrigeración por aire se pueden instalar rápidamente y en cualquier lugar. Con la ayuda de un sistema de tratamiento de agua MELAG, el suministro de agua es completamente automático, ahorrando tiempo.



La facilidad de uso

Un manejo simple de la serie Euroklav® **con el probado concepto de 4 botones MELAG** le brinda más tiempo para sus pacientes. Porque el concepto operativo intuitivo reduce la carga de trabajo y evita errores de aplicación durante la esterilización.


Con nuestras **herramientas digitales llevan el proceso de descontaminación del instrumento al siguiente nivel**. Descubra nuestro contenido multimedia en el sitio web de MELAG.

Herramientas digitales para flujos de trabajo inteligentes.


Benefíciase de nuestro personal de ventas en su región y de las herramientas digitales de nuestro sitio web.



Biblioteca multimedia:
más de 300 videos sobre reprocesamiento seguro de instrumentos:
www.melag.com/es/multimedia

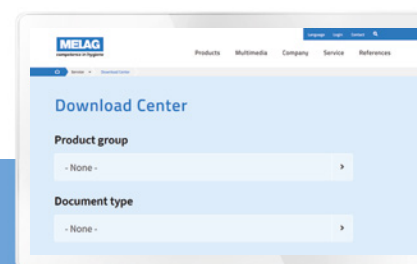

Centro de descarga:
recupere documentos MELAG en cualquier lugar y en cualquier momento:
www.melag.com/service/es/servicio/centro-de-descarga

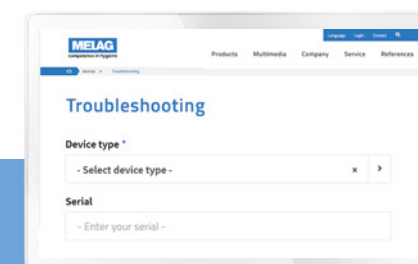

Solución de problemas
Introduzca números de mal funcionamiento para acceder a soluciones inmediatas:
www.melag.com/es/service/troubleshooting

La solución del sistema MELAG

Para su seguridad: Todo en una mano.

Los autoclaves Euroklav® son una parte importante del reprocesamiento de instrumentos conforme con el instituto RKI.

La interacción perfecta de la solución del sistema MELAG le permite lograr procesos de trabajo aún más eficientes y la máxima protección para los pacientes y el personal. Aproveche las ventajas de la solución del sistema MELAG con productos del fabricante líder para la higiene en clínicas:



Personal:
Un socio de contacto central para responder todas sus preguntas



Eficiente:
Reducción de costes sincronizando el servicio



Proceso optimizado:
Flujo de trabajo y operación coordinada

Mejore la calidad de la descontaminación del instrumento: combine los esterilizadores de vapor MELAG con las termodesinfectadoras MELAtherm® para una limpieza y desinfección eficientes, selladoras MELAseal® para el embolsado seguro del instrumento y el software de documentación y aprobación fácil de usar MELAtrace® para garantizar un flujo de trabajo ideal para la consulta y clínica.



*en combinación con MELAtrace®

El proceso de descontaminación del instrumento:



✓ Limpieza y desinfección con **MELAtherm®**



✓ Embalaje con **MELAseal®**



✓ Esterilización con **Euroklav®** autoclaves



✓ Documentación y aprobación con **MELAtrace®**



✓ Etiquetado con **MELAprint® 60***

Perfección en cada detalle


Configure su autoclave Euroklav®.

Compatible con MELAdem® 40 y MELAdem® 53 / 53 C Utilice el máximo potencial de la serie Euroklav®: con la amplia gama de accesorios y productos adicionales de la solución del sistema MELAG, puede adaptar los procesos a sus necesidades y así lograr los mejores resultados con el reprocesamiento de instrumentos.



Sistema de carga

Para un uso óptimo de la cámara de esterilización, ofrecemos sistemas de carga ideales para todos los escenarios de aplicación.

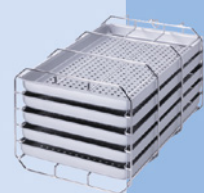

Soporte A Plus

para colocar cinco bandejas para instrumentos individuales

Art.-no. 82620 para Euroklav® 29 VS+
Art.-no. 82630 para Euroklav® 23 VS+ / S+



Soporte D

para colocar dos recipientes de esterilización grandes

Art.-no. 46840 para Euroklav® 29 VS+
para Euroklav® 23 VS+ / S+



Contenedor de esterilización

Están perforados en la base y la tapa para obtener resultados óptimos de esterilización y secado. Descubra nuestra amplia gama de contenedores de esterilización:

www.melag.com/es/productos/almacenamiento-esteril



Soporte de folios


permite la esterilización vertical de instrumentos embolsados para obtener resultados de secado perfectos

Art.-no. 22410 para Euroklav® 29 VS+
Art.-no. 22420 para Euroklav® 23 VS+ / S+



Documentación

La serie Euroklav® ofrece documentación y aprobación legalmente compatibles con medios de salida modernos.

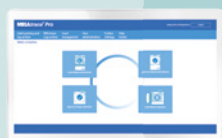

MELAtrace®

Para documentación profesional, aprobación y seguimiento de todo el proceso de preparación

MELAtrace® sin gestión de carga:
Art.-Nr. 21128
MELAtrace® Pro con gestión de carga:
Art.-Nr. 21138



MELAnet Box

transfiere todos los registros a la computadora y a la red de la consulta automáticamente

Art.-no. 40296



Impresora de tarjetas CF MELAflash

guarda todos los registros del autoclave, simple y fácilmente en una tarjeta CF

Art.-no. 01039



MELAprint® 44

imprime los registros de esterilización en formato papel

Art.-no. 01144



Tratamiento de aguas

Las unidades de tratamiento de agua MELAdem® proporcionan agua desmineralizada de alta calidad para proteger tanto su esterilizador de vapor como sus instrumentos



MELAdem® 40

es un intercambiador de iones para consultas y clínicas que esterilizan hasta tres ciclos por día

MELAdem® 40: Art.-no. 01049
Set de conexión: Art.-no. 09031



MELAdem® 47

es una unidad de ósmosis inversa de alto rendimiento para consultas y clínicas con mayores requisitos de esterilización

MELAdem® 47: Art.-no. 01047
Set de conexión: Art.-no. 09032



MELAdem® 53 / 53 C

es una unidad de tratamiento de agua de alta capacidad para MELAtherm® y hasta tres dispositivos adicionales

Art.-no. 01038



MELAjet®

facilita el enjuague y lavado de instrumentos con agua desmineralizada *

Art.-no. 27300

*Compatible con MELAdem® 40 y MELAdem® 53 / 53 C

Datos técnicos

Cifras y hechos de un vistazo

Programas		Euroklav® 23 VS+ / S+ Euroklav® 29 VS+	Tiempo de secado
Programa Rápido S*	134°C, Tiempo de espera: 3,5 Min.	15 Min.	10 Min.
Programa Universal	134°C, Tiempo de espera: 5,5 Min.	25 Min.	25 Min.
Programa Delicado	121°C, Tiempo de espera: 20,5 Min.	40 Min.	25 Min.

* Solo para instrumentos sin embolsar

	Euroklav® 23 S+	Euroklav® 23 VS+	Euroklav® 29 VS+
Numero de articulo	10055	10056	10057
Tipo de equipo	Autónomo (compatible con el sistema de tratamiento de agua adicional)		
Tamaño de cámara	45 cm largo x Ø 25 cm	45 cm largo x Ø 25 cm	35 cm largo x Ø 25 cm
Volumen de cámara*	23 Litros	23 Litros	17 Litros
Cantidad de carga	4 kg Instrumentos 0,6 kg Textiles	4 kg Instrumentos 1 kg Textiles	3 kg Instrumentos 0,8 kg Textiles
Dimensiones del equipo (A x H x P)	42,5 x 49 x 70 cm El equipo cabe en una mesa de 60 cm.	42,5 x 49 x 70 cm El equipo cabe en una mesa de 60 cm.	42,5 x 49 x 62 cm El equipo cabe en una mesa de 50 cm.
Peso	45 kg	45 kg	42 kg
Tensión	220-240 V / 50/60 Hz		
Potencia	2.300 Watt	2.300 Watt	2.100 Watt

* Especificación de litros redondeada

Soluciones de sistema, Innovación y Calidad

Somos una empresa familiar dirigida y administrada por sus propietarios, los cuales se ha concentrado en productos de higiene para las clínicas desde su fundación en 1951. La fabricación y producción se encuentran exclusivamente en Alemania con más de 450 empleados en aproximadamente 25.000 m². Y somos líder mundial en el reprocesamiento de instrumentos.



MELAG
competence in hygiene

Puede encontrar más
información en
www.melag.com

MELAG Medizintechnik