

MELAG



vet

SteriHero

Mi autoclave. Mi super poder.

 El autoclave está destinado al uso en medicina veterinaria. No es un producto sanitario según 93/42/CEE o UE 2017/745 (MDR).

Su nuevo **super** poder

No importa qué grandes tareas le depare el día, SteriHero Vet le protege. El nuevo autoclave autónomo ha sido diseñado específicamente para la medicina veterinaria, desde las características hasta el precio. Tecnologías que marcan tendencia, una pantalla increíblemente avanzada y la calidad única de MELAG - made in Germany le dan el super poder para cambiarlo todo.



Súper seguro

Seguridad para sus pacientes peludos: Los autoclaves de clase B con el proceso de vacío fraccionado proporcionan la esterilización más segura de todos los instrumentos embolsados y no embolsados - independientemente de su tipo y complejidad.

Esterilización a vapor conforme a la norma EN 13060

Súper potente

Potencia más que suficiente para lo que quiera hacer: Las altas capacidades de carga, los tiempos de ciclo rápidos a partir de 16 minutos y un eficaz secado al vacío garantizan que sus instrumentos vuelvan a estar listos para su uso muy rápidamente.

Hasta 6 kg en 5 bandejas extra largas



Súper inteligente

La intuitiva interfaz de usuario con una gran pantalla Smart-Touch Display lo hace todo más fácil: Desde la selección de programas hasta la documentación. Con la ayuda de la monitorización del proceso, puede proporcionar una prueba completa de una esterilización satisfactoria.

Documentación USB o vía red

Súper robusto

Un autoclave nunca debería fallar: No hacemos concesiones en cuanto a fiabilidad y desarrollamos nuestros autoclaves bajo los más altos requisitos de calidad en nuestra sede de Berlín.

100 % calidad - made in Germany



Quality made in Germany

El fiel compañero de las prácticas y clínicas veterinarias



„Con las soluciones MELAG para reprocesamiento de instrumentos, ofrecemos la máxima protección para nuestros fieles amigos: ¡las mascotas!“

Clínica Veterinaria Animalogic,
España



„Nuestra máxima prioridad son nuestros pacientes y sus dueños: por eso confiamos en MELAG para el reprocesamiento“

Especialistas en pequeños animales
AniCura, Alemania



„La solución de sistema MELAG permite flujos de trabajo perfectos para ahorrar tiempo y costes“

Clínica Veterinaria CMV,
Italia

Protege el medio ambiente. Y sus pacientes peludos.

El SteriHero Vet garantiza una esterilización segura según sus necesidades con una amplia gama de programas. Pero eso no es todo: el concepto pionero de aparato autónomo y la función de ahorro de energía Power Save hacen de SteriHero Vet la mejor solución para su presupuesto y el medio ambiente.

Programas	Vet B	Rápido S	Rápido B	Delicado B	Priones B
Especificación del proceso	134 °C, tiempo de esterilización: 5,5 min	134 °C, tiempo de esterilización: 3,5 min	134 °C, tiempo de esterilización: 5,5 min	121 °C, tiempo de esterilización: 20,5 min	134 °C, tiempo de esterilización: 20,5 min
Tiempos de funcionamiento (con carga mínima a máxima) *	24 – 31 min	16 – 20 min	24 – 27 min	39 – 47 min	37 – 48 min
Secado (temporizado)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

* Tiempos de los programas Tipo-B para carga individual embolsada y Rápido S para carga sin embolsar. Los tiempos pueden variar en función del tipo y la cantidad de carga.

Art. n.º	Tipo del equipo	Tamaño de la cámara	Volumen de cámara	Cantidad de carga	Dimensiones del aparato (ancho x alto x fondo)	Peso	Suministro de corriente	Interfaces de documentación
ME10123V	Autoclave autónomo de clase B autoclave (Compatible con unidad de tratamiento de agua)	ø 25 cm x 45 cm de largo	23 litros	6 kg de instrumentos / 2 kg de textiles	47 x 50 x 64 cm (el aparato cabe en una mesa de 60 cm)	49 kg	220 - 230 V / 50 - 60 Hz (2100 vatios)	USB, red

 El autoclave está destinado al uso en medicina veterinaria. No es un producto sanitario según 93/42/CEE o UE 2017/745 (MDR)

El equipo ideal para el reprocesamiento de instrumentos

La solución de sistema MELAG hace realidad su visión de un flujo de trabajo higiénico que ahorra tiempo, espacio y costes. Póngase en contacto con nosotros para programar una cita individual y obtener más información sobre la perfecta combinación de desinfectadoras térmicas, dispositivos de sellado, autoclaves y soluciones de software de MELAG.



In situ en su práctica




A través de una demostración en vivo online



En la sala de exposición de MELAG

Rev.0-23/2031-03.07-ES-ME

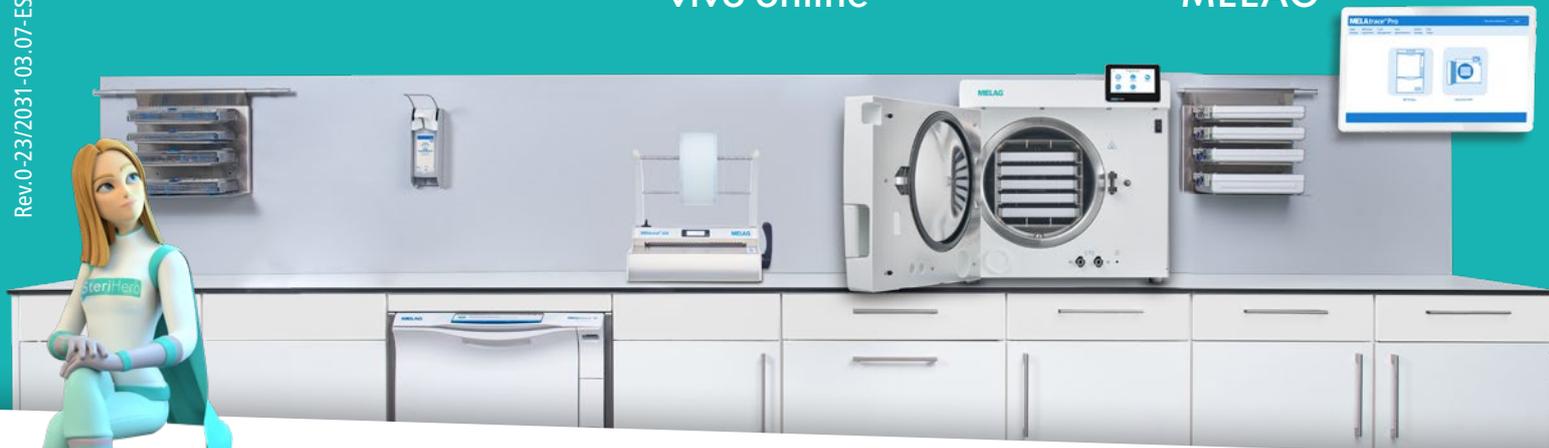

Ahorre papel, proteja el medioambiente:

Con el fin de reducir el papel, ponemos a su disposición la documentación del usuario de forma electrónica en nuestro centro de descargas. Visite www.melag.com para más información

MELAG
competence in hygiene