



MELAstore-清洗框架系统

随意组合，快速整理

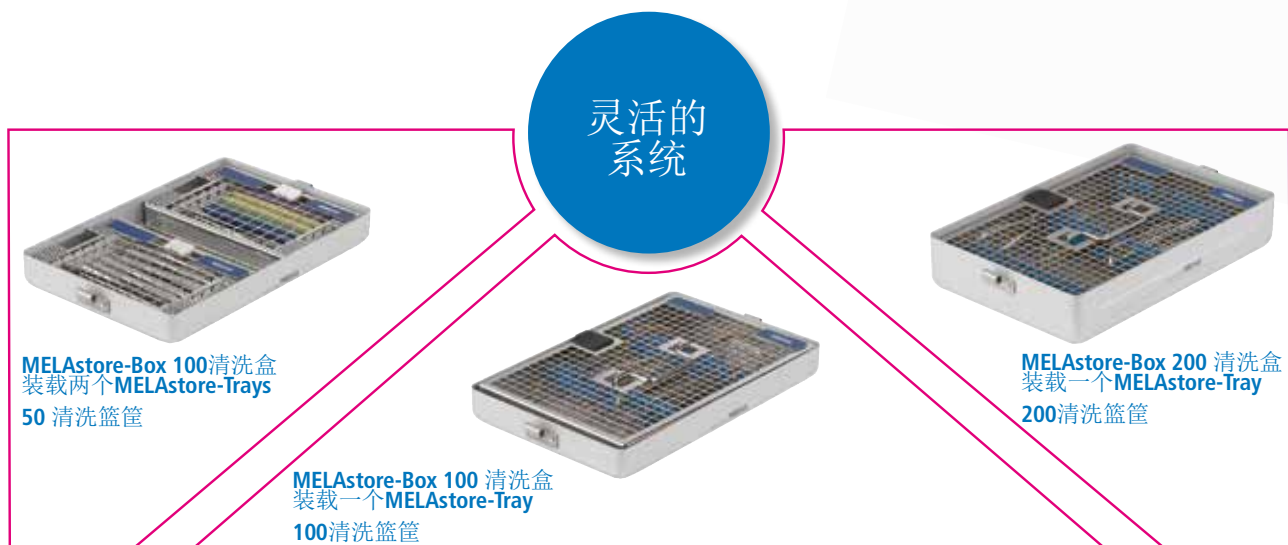

使用创新的MELAstore系统在第一年后就能平衡成本

只使用一个MELAstore-Tray 100清洗篮筐和一个MELAstore-Box 100清洗盒相组合就可以对14个器械进清洗处理，相比传统的单独打包您可以节省8分钟时间。每天使用一次MELAstore系统，不到一年时间就可以平衡购买成本。如果每天都使用，则可以在更短时间内收回成本。

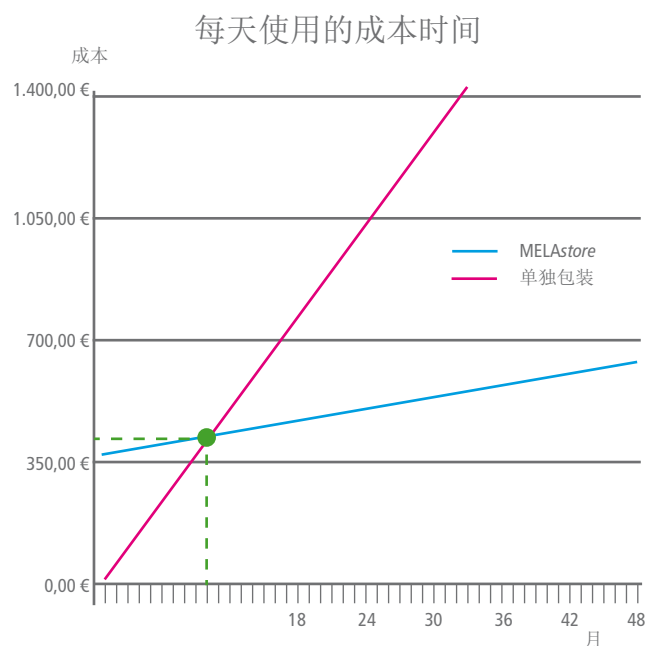

MELAG – 来自柏林，世界领先的家族自营企业



Management System
EN ISO 13485:2012
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 0000051908



MELAstore®

通过优化的流程来节省处理时间。



Quality – made in Germany

MELAG
competence in hygiene

MELAstore-清洗系统

器械处理更快、更好、更经济。

节省时间

使用包含清洗篮筐、灭菌盒，比使用传统的单一打包封口方法节省多达**30分钟**时间。

保护环境

使用**MELAstore** 可以明显节约灭菌包装带的消耗，从而更经济环保。

优化流程

使用**MELAstore**提高了器械处理的标准级别，优化了质量管理。

提高保护

使用**MELAstore**系统进行器械处理，可以提高诊所团队人员和对器械的保护级别。



MELAstore – 清洗篮筐



MELAstore – 清洗盒

灵活的
系统

MELAstore 清洗系统

简化了工作流程、节省时间及耗材

- 1 在清洗机MELAtherm中装载MELAstore清洗篮筐**
直接将器械放入MELAstore篮筐中，这些篮筐可以摆放在MELAtherm清洗机中相应的框架里。然后开启MELAtherm清洗机进行清洗和消毒。
- 2 使用 MELAstore篮筐和MELAstore盒子进行打包**
将MELAstore 篮筐放入适合的MELAstore灭菌盒中。这样就已经完成了打包过程。相对传统的对单独器械打包和封口，使用MELAstore，每天可以节省大量时间、耗材和金钱。
- 3 在灭菌器中装载MELAstore灭菌盒**
最后将MELAstore灭菌盒放入灭菌器进行灭菌。

使用**MELAstore**系统可以提高清洗机和灭菌器的装载量。



使用 **MELAstore**系统可以将**MELAtherm**清洗机和**Premium**级灭菌器的装载量提高50%。

特别为MELAstore 和MELAtherm清洗机研发的托架可以同时容纳12个MELAstore 100型或24个MELAstore 50型清洗篮筐进行清洗和消毒。这样就在同样的体积下将装载量提高了50%并节省了能耗。

现在灭菌器可以从以前的6千克装载量优化到现在的9千克装载量，而且消耗的水和能源保持不变。现在还可以同时对4个MELAstore-Boxen 100灭菌盒进行灭菌。这使得Premium级灭菌器的装载量在同级里无人左右。