



Vacuklav[®] 44 B+ Evolution

精铸经典, 共赢未来

先进的技术实现了出色的工作流程：依靠我们在德国制造的创新型蒸汽灭菌器。作为您的有力合作伙伴，我们向您提供：



经验
公司成立
1951



信誉
设备远销全世界
>500.000



质量
德国制造



创新
450 员工和工程师

国际专利技术

双腔体蒸汽发生器技术
强力水环式真空泵
独创DRYtelligence智能干燥功能

更快的速度

通用程序30min
快速裸消8min

黄金容量

黄金容量24L
器械装载量9000g

触摸液晶屏

彩屏与蓝屏双选择
包括中文多种国家文字选择
记录、放行及追逆功能

自压螺旋式门锁

预防误操作安全性更高
自适应调整门密封圈压合

4次前预真空

真空度高达 - 0.95bar
轻松通过严格PCD挑战实验
细长官腔器械灭菌更彻底


感控信息系统

对接医疗系统感控信息化网络
实时远程监控设备运行状态
每批次灭菌记录打印并保存



完美在于细节

可以对灭菌器进行自由配置

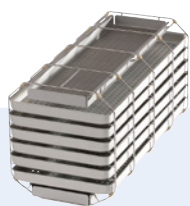

标准型托盘支架

可以摆放5个标准托盘或器械盒、包裹等。



MELAstore® 装载系统

定制清洗筐及灭菌盒使得灭菌处理流程更加安全高效



灭菌报告打印机

用于对灭菌报告的即刻输出，符合感控要求。



批次监测体

管腔测试体，对管腔器械的灭菌进行批次监测。

技术参数

	Vacuklav® 44 B+ Evolution	Vacuklav® 44 B+ Evolution	器械灭菌时间	织物灭菌时间	干燥时间	
设备类型	上下水型	快速S程序	134°C, 灭菌3.5分钟	8分钟	-	2
腔体尺寸	深45 cm x 直径 25 cm	快速B程序	134°C, 灭菌5.5分钟	14分钟	-	6
腔体体积	24 Liter	通用程序	134°C, 灭菌5.5分钟	16分钟	26分钟	12
载重量	最大9千克器械/2.5千克 织物	柔和程序	121°C, 灭菌20.5分钟	31分钟	43分钟	12
设备外形尺寸	宽46 cm x 高50 cm x 深68 cm 含液晶屏高度为56cm 适合60cm宽度台面	关注我们的微信公众号： 了解有关MELAG感控领域的更多信息： 详细的产品信息，销售和服务 联系人，最新新闻和展会日期一目了然！				
重量	64 kg					
电源	230 V / 50/60 Hz					
功率	3.400 Watt					



MELAG
competence in hygiene

其它相关信息详见我们的
网址：

www.melag.com/zh-hans

MELAG Medizintechnik